

Fauteuil roulant embase roulante Carony Classic

Un fauteuil roulant qui se transforme en siège de véhicule, en laissant l'utilisateur assis.

Carony Classic est un fauteuil roulant qui permet à l'utilisateur de rester assis pendant le transfert vers le siège du véhicule. Arrimé à une **embase pivotante** ou **élévateur**, le **siège** du fauteuil roulant peut coulisser de sa base sur la plaque d'arrimage où il se verrouille en toute sécurité pour remplacer le siège du véhicule. **Pour résumer le principe, l'utilisateur peut passer du fauteuil roulant au siège de voiture et inversement sans se lever.**



Fauteuil roulant Carony Classic

Caractéristiques du fauteuil roulant embase roulante Carony Classic

- Disponible avec **roues arrières de 12" ou 24"**, convient aux personnes de toutes tailles, y compris les personnes de petite taille et les enfants.
- **Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et pour le véhicule**
- Nombreuses options de personnalisation
- Utilisation comme **fauteuil roulant pendant le transport** (nécessite des arrimages pour le transport)
- Compatible avec la **fonction d'inclinaison Tilda**
- Châssis en métal, coloris rouge
- Différents options disponibles, **contactez-nous** pour en savoir plus

COMPATIBILITÉ DE L'EMBASE PIVOTANTE

TURNOUT	TURNY MANUAL	TURNY LOW VEHICLE	TURNY HD/ORBIT	TURNY EVO	6-WAY BASE
✓ ²	✗	✗	✓ ²	✓ ²	✗

2. nécessite des rails Carony




accès véhicule • transfert fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
 contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65


www.access-ability.eu

Dimensions et modèles


VUE DU DESSUS

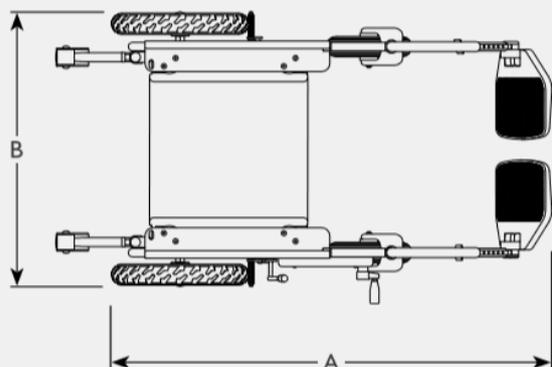

VUE DU DESSUS

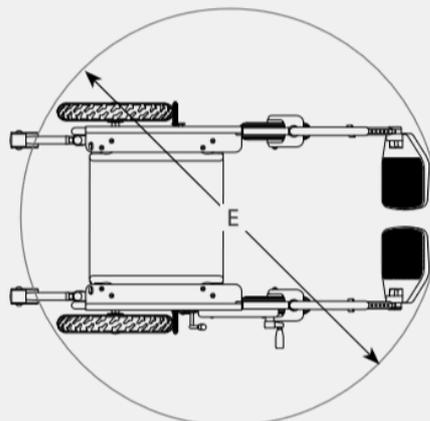

VUE LATÉRALE

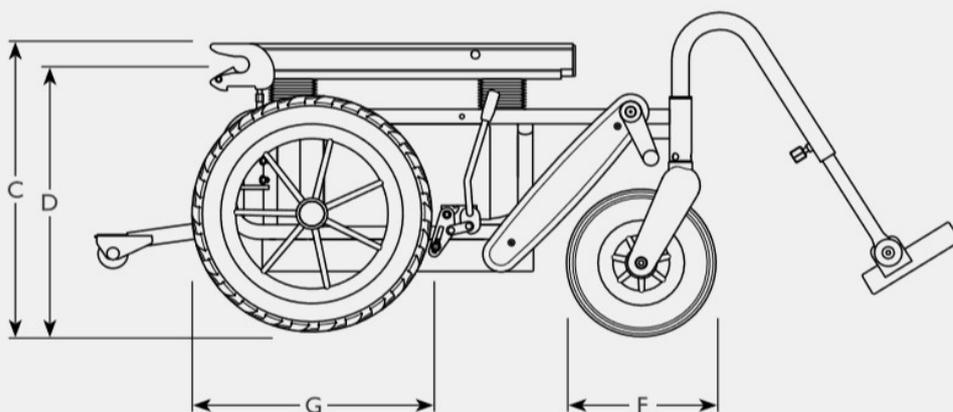

Fauteuil roulant Carony Classic

	Côté du levier de frein	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur d'arrimage	Rayon de braquage	Diamètre roue avant	Diamètre roue arrière	Poids maximal de l'utilisateur	Poids de l'unité
Carony Classic, châssis		A	B	C	D	E	F	G		
Carony Classic 12", châssis	droite	67	61	38-48	35-45	84	8"	12"	100	15
Carony Classic 12", châssis	gauche	67	61	38-48	35-45	84	8"	12"	100	15
Carony Classic 24", châssis	droite	79*	67	38-48	35-45	84	7"	24"	100	19
Carony Classic 24", châssis	gauche	79*	67	38-48	35-45	84	7"	24"	100	19
Carony Classic 12" fixe, châssis	droite	67	61	38, 43, 48	35, 40, 45	84	8"	12"	100	14
Carony Classic 12" fixe, châssis	gauche	67	61	38, 43, 48	35, 40, 45	84	8"	12"	100	14

Tous les poids et dimensions sont exprimés en kilogrammes et en centimètres et ne sont communiqués qu'à titre de référence. *Protection antibasculement incluse
Remarque: Châssis seul, sans siège. Pour connaître les options disponibles, voir le configurateur Carony Classic.

accès véhicule • transfert fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
 contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu